

snögg

MEDSYSTEM

Medizinische Anlagen und Systeme GmbH

Katalog 2019

V
E
R
B
A
N
D
S
T
O
F
F
E



NEXT

Pflasterspender



Der Snøgg Pflasterspender wurde speziell für Pflasterrollen 6 cm x 4,5 m entwickelt und ist als Tischmodell oder mittels mitgelieferter Wandhalterung immer griffbereit. Mit dem integrierten Messer wird das Pflaster schnell und mühelos auf die gewünschte Länge zugeschnitten.

Abmessung: 9 x 16 x 16 cm (B / H / T)

Ihre Vorteile:

- immer griffbereit
- hält die Pflasterrolle trocken und sauber
- einfache Handhabung
- ansprechendes Design

Pflasterspender Artikelnummer: 012205

SOFT NEXT Pflasterverband

blau

Artikel	Artikelnummer
6 cm x 1 m	012324
3 cm x 4,5 m	012334
6 cm x 4,5 m	012344

SOFT NEXT Pflasterverband

natur

Artikel	Artikelnummer
6 cm x 1 m	012322
3 cm x 4,5 m	012332
6 cm x 4,5 m	012342



Pflasterverband SOFT NEXT

natur



Das einzigartige elastische Pflaster klebt weder auf Haut, Haar oder Wunde und hält auch unter Wasser. SOFT NEXT kann mit Salben wie auch direkt auf die Wunde gelegt werden. Durch die hohe Elastizität wird die Beweglichkeit nicht eingeschränkt.

Anwendungsbereiche allgemein:

Kleine bis mittlere Verletzungen an den oberen und unteren Extremitäten.

Spezialbereiche:

Pergamenthaut, Schmetterlingshaut,
Fingerkuppen- und Zehenverbände

Einsatzgebiete:

Haushalt, Garten, Freizeit, Sport, Werkstatt
Kranken- und Altenpflege
Erste Hilfe und Notfallmedizin



- latexfrei
- blutstillend
- absorbierend
- wasserbeständig
- weich und elastisch
- klebstofffrei / selbstaftend
- klebt nicht auf Haut und Haar

Pflasterverband SOFT NEXT blau

Das blaue Signalpflaster mit allen Eigenschaften und Vorteilen der naturfarbenen Ausführung.

Spezielle Einsatzgebiete:

Gastronomie und Werkstätten



UNI



...der einzigartige Verband!

Für das Verbinden mit UNI NEXT benötigen Sie keine Schere, keine Clips, keine Sicherheitsnadeln und auch keinen zusätzlichen Fixierungsverband.

Anwendungsbereiche allgemein:

mittlere bis schwere Verletzungen
(Spezialverbände je nach Körperregion)

Spezialbereiche:

Pergamenthaut, Schmetterlingshaut, Salbenverbände,
Spezialverbände für Kopf- und Torsoverletzungen

Einsatzgebiete:

Erste Hilfe, Notfallversorgung, Vorbehandlung

Einsatzbereiche im Krankenhaus:

Unfall, Orthopädie, Verbrennung, Plastische Chirurgie

- UNI NEXT ist komplett latexfrei!

- klebstofffrei
- klebt nicht auf Haut und Haar
- weich und elastisch
- stark und robust
- wasserbeständig
- blutstillend und absorbierend
- geeignet als Druckverband
- Spezialverbände für Kopf und Torso

Burnshield Hydrogel Spray

Die Soforthilfe bei leichten Verbrennungen.

Das Gel wird direkt auf die Verbrennungswunde, Verbrühung oder den Sonnenbrand gesprüht. Es haftet, ohne zu verrinnen oder zu tropfen.

In Verbindung mit SOFT NEXT kann bei Bedarf ein kühlender Verband schnell angelegt werden.

- lindert den Schmerz
- kühlt
- klebt nicht
- befeuchtet
- reduziert die Infektionsgefahr
- besonders hautverträglich
- auch für Kinder geeignet



Artikel

Artikelnummer

UNI NEXT Verband

8 cm x 50 cm	012361
8 cm x 1 m	012363
8 cm x 5 m	012362

UNI NEXT Lite

8 cm x 75 cm	012364
--------------	--------

UNI NEXT Kopfverband

18 cm x 60 cm	012365
---------------	--------

UNI NEXT Torsoverband

25 cm x 5 m	012366
-------------	--------

Burnshield Hydrogel

Spray 125ml	871014
-------------	--------

Burn Kit Pro

Kühlung und Erste Hilfe bei Verbrennungen.

Mit dem Burn Kit Pro versorgen Sie Ihre Brandwunden schnell und effektiv. Behandeln Sie die Wunde direkt mit dem Burnshield Spray oder den Wundauflagen und umwickeln Sie sie anschließend mit SOFT NEXT oder UNI NEXT um einen kühlenden Verband anzulegen. Suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf.

Der Koffer kann mühelos in die mitgelieferte Wandhalterung eingesetzt und wieder entnommen werden.



Artikelnummer: 803156

Der Burn Kit Pro Koffer beinhaltet:

- 1 Packung SOFT NEXT 6 cm x 4,5 m
- 1 Packung UNI NEXT 8 cm x 1 m
- 3 Stück BURNSHIELD Brand-Wundauflagen* 10 x 10 cm



Burn Kit Home



Klein, handlich - praktisch!

Das Burn Kit Home ist ideal für Ihren Haushalt und Ihre Freizeitaktivitäten. Das Set besteht aus:

- 1 Packung SOFT NEXT natur 6 cm x 1 m
- 3 Stück BURNSHIELD Brandwundauflagen* 10 x 10 cm
- 3 Stück BURNSHIELD Burnblott Sachtet 3,5 ml
- 2 Paar Einweghandschuhe
- 1 Elastische Binde

*Die BURNSHIELD Brand-Wundauflagen sind auch im Zweierpack erhältlich.

Wie der BURNSHIELD Hyrogel Spray sind auch die Brandwundauflagen steril und reduzieren die Infektionsgefahr. Sie kühlen, lindern den Schmerz und minimieren das Risiko von Blasenbildungen.

In Kombination mit SOFT NEXT ist ein kühlender Verband schnell angelegt. Die BURNSHIELD Produkte sind auch für Kinder geeignet.



Sport

Sports Bag



Das Sports Bag beinhaltet Erste-Hilfe-Artikel, Tapes und Cold Packs.

Die Tasche bietet die ideale Organisation Ihrer Artikel und überzeugt durch ihr modernes Design und Tragekomfort.

Sie ist aus langlebigem Material hergestellt und innen mit zwei Gittergewebetaschen ausgestattet, die mit dem Reißverschluss einfach geöffnet und geschlossen werden können.

Artikelnummer: 028504

Maße: 22 x 30 x 12 cm

Das Sports Bag beinhaltet:

- | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|
| • 1 Packung SOFT NEXT natur | 6 cm x 1 m | • 1 Packung UNI NEXT Kopfverband | 18 cm x 60 cm |
| • 1 Packung UNI NEXT | 8 cm x 1 m | • 1 Stück Sports Tape Vitality | 3,8 cm x 7,5 m |
| • 2 Stück Cold Pack small | 11 cm x 15 cm | • 1 Stück Elasto Quick Sport | 7,5 cm x 4,5 m |
| • 2 Stück Cold Pack large | 23 cm x 15 cm | • 1 Stück Elasto Quick Sport | 3,0 cm x 4,5 m |

Hot & Cold Therapy Pack

Für die angenehme Therapie zu Hause.

Wärmeanwendung zur Behandlung von Verletzungen und Beschwerden wie z.B.

- Verspannungen
- Muskelkater
- schmerzende Gelenke

Erwärmen Sie es in der Mikrowelle oder in warmen Wasser bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die Dauer variiert je nach Leistung der Mikrowelle. Legen Sie das Hot & Cold Pack mit dem mitgelieferten Fließ auf die Haut.

Kälteanwendung bei:

- Entzündungen von Gelenken und Muskeln
- Sehnenscheidenentzündung
- Blutergüsse und Prellungen
- Insektenstiche

Das Hot & COLD PACK für leichte Kühlung in den Kühlschrank legen. Für eine stärkere und längere Kühlung sollte es in den Gefrierschrank / Eisfach ca. für 60 - 120 Minuten gelegt werden.



SPORTSTAPE VITALITY

So tapen die Profis!

Mit dem SPORTSTAPE VITALITY sind Sie nicht nur für die nächste sportliche Aktivität, sondern auch für die Arbeit im Garten bestens gerüstet. Das Tape unterstützt Ihre Gelenke, Bänder und Muskeln, um Verletzungen vorzubeugen oder bei bestehenden den Schmerz zu lindern. Maße: 3,8 cm x 7,5 m / Klebstoff: Zinkoxid



(inkl. Anleitung)

Artikelnummer: 183511

- Taping an den Fingern um Blasen zu vermeiden
- Taping um das Handgelenk
- Taping an den Füßen

K-RELIEVE TAPE Doppelpackung

Taping ist keine Erste-Hilfe-Maßnahme, sondern es dient als Unterstützung während des Sportes. Bei Verletzungen sollte deshalb zuerst ein Facharzt kontaktiert werden, der die Schmerzsache diagnostiziert. Erst danach wird das K-RELIEVE TAPE entsprechend einer kinesiologischen Anleitung, beispielsweise am Knie oder Rücken, angewandt. Maße: 5 cm x 3,75 m / Material: elastische Baumwolle

Artikelnummer für blau: 183527 / pink: 183526 / schwarz: 183525

- elastisch
- flexibel
- schmerzstillend
- wasserbeständig



SPORTSTAPE Doppelpackung

Für Taping-Einsteiger, aber auch für Fortgeschrittene ist dieses Tape die richtige Wahl. Einfach getaped unterstützt Sie das Sports Tape bei Ihren Freizeitaktivitäten.

Maße: 3,8 cm x 10 m

Klebstoff: Schmelzklebstoff

Artikelnummer: 183509

Elasto Quick

Elasto Quick ist frei von Klebstoffen, haftet nur auf sich selbst und kann als Tape oder als Überverband zur zusätzlichen Fixierung von Verbandstoffen wie z.B. SOFT NEXT und UNI NEXT eingesetzt werden.

Anwendungsbeispiel: Tapen Sie Ihre Finger mit Elasto Quick um Blasenbildungen und Verletzungen der Haut bei Gartenarbeiten oder bei Ihren Sportaktivitäten zu vermeiden.

Artikelnummer: 046000 7,5 cm x 4,5 m grün
046002 3,0 cm x 4,5 m weiß



Animal

Animal SOFT



- latexfrei

Pflasterspender zusätzlich erhältlich (siehe Seite 1)

Querelastischer, selbsthaftender Pflasterverband, der einfach in der Handhabung ist und die Beweglichkeit des Tieres nicht einschränkt. Er klebt nicht auf Haut, Fell oder Wunde und kann direkt an der Verletzung angewandt werden.

Anwendungsbereiche allgemein:

Behandlung von kleinen bis mittelgroßen Verletzungen.

Kombinationsverbände mit anderen Animal Produkten sind möglich.

Spezialbereiche:

Pfoten, Ohren, Zitzen

Einsatzgebiete:

Groß- und Kleintiere

Animal VET

Wie Animal SOFT ist auch der Animal VET Verband querelastisch und selbsthaftend, jedoch dicker und für stärkere Beanspruchung konzipiert. Er ist einfach in der Handhabung und reduziert die Bewegungseinschränkung auf ein Minimum. Er klebt nicht auf Haut, Fell oder Wunde und kann direkt auf die Wunde gelegt oder mit sterilen Kompressen verwendet werden.

- latexfrei



Anwendungsbereiche allgemein:

Wundbehandlung von mittleren bis schweren Verletzungen an allen Körperregionen des Tieres.

Kombinationsverbände mit anderen Animal Produkten sind möglich.

Spezialbereiche:

Druckverbände
Stützverbände

Einsatzgebiete:

Groß- und Kleintiere

- klebstofffrei / selbsthaftend
- wasserbeständig

- klebt nicht auf Haut und Fell
- blutstillend

- weich und elastisch
- absorbierend

Animal POLSTER

Einseitig klebender Schaumstoffverband.

Ideal zum Polstern und zur Fixierung an stark beanspruchten oder empfindlichen Körperregionen.

Der Verband muss in Verbindung mit einer Komresse, Animal SOFT oder Animal VET angewandt werden.

Anwendungsbereiche allgemein:

mittlere bis schwere Verletzungen
(Spezialverbände je nach Körperregion)

Einsatzgebiete:

Groß- und Kleintiere

• latexfrei



• weich und elastisch

• stark und robust

• wasserbeständig

Elasto Quick | Anwendung VET-Medizin

Elasto Quick ist eine klebstofffreie, längselastische Binde, die im Bereich der Veterinärmedizin als Fixierung von Kompressen oder anderen Bandagen dient. Die Gelenke werden in ihrer Beweglichkeit nicht beeinträchtigt.

Elasto Quick klebt nicht auf Haut, Fell oder Wunde und haftet auf sich selbst. Die Anwendung von Elasto Quick erfolgt schnell und mühelos!



Artikel

Artikelnummer

Animal SOFT
6 cm x 4,5 m

013074

Animal VET
14 cm x 5 m
8 cm x 5 m
8 cm x 1 m

013073

013072

013071

Animal POLSTER
14 cm x 2 m
9 cm x 2 m

012117

012116

Elasto Quick
7,5 cm x 4,5 m
3 cm x 4,5 m

046000

046002

Animal

Erste Hilfe Set - Pferd



Art.-Nr. 001282

Dieses Set beinhaltet:

- 1 Packung Animal SOFT 6 cm x 4,5 m
- 1 Packung Animal VET 8 cm x 5 m
- 1 Packung Animal POLSTER 14 cm x 2 m
- 1 Packung SOFT NEXT 6 cm x 1 m
- 2 Stück Elasto Quick 7,5 cm x 4,5 m
- 4 Packungen Cold Pack large 23 cm x 15 cm


Mit diesem Set erhalten Sie alle notwendigen Verbandstoffe um Erste Hilfe an ihrem Pferd leisten zu können. Verbinden Sie die Verletzung mit Animal SOFT und Animal VET und setzen Sie gegebenenfalls Elasto Quick als zusätzliche Fixierung ein.

Verletzungsstellen, die nicht leicht umwickelt werden können, werden mit Animal VET und Animal POLSTER behandelt. Schneiden Sie Animal VET auf die benötigte Größe zu und verwenden Sie es als Pad direkt auf der Wunde. Animal POLSTER ist einseitig klebend und wird über Animal VET angewandt.

Diese und viele andere Kombinationsverbände werden im Detail in unseren Demo-Videos im Internet auf "shop.medsystem.at" erklärt.

Weiters beinhaltet dieses Set vier Cold Packs und eine Packung SOFT NEXT.

Erste Hilfe Bag - Hund & Katze

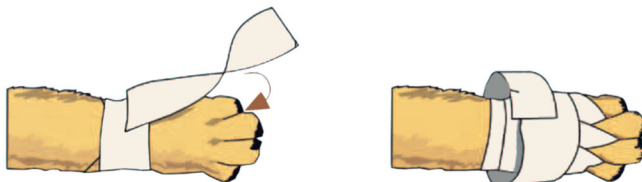

Art.-Nr. 001281

Ob im Garten, im Park oder auf der Rennbahn - Unfälle passieren. Mit unserem Erste Hilfe Bag können Sie schnell reagieren. Die Tasche beinhaltet Qualitätsprodukte um kleine bis mittlere Verletzungen zu verbinden. Animal SOFT und Animal VET werden direkt auf die Wunde gelegt. Bei stärkerer Beanspruchung werden sie mit Elasto Quick zusätzlich fixiert. Die Coldpacks in zwei verschiedenen Größen kühlen die Verletzung bis zu 30 Minuten lang um Schwellungen zu reduzieren.



Dieses Set beinhaltet:

- 1 Soft Bag 22 x 30 x 12 cm
- 1 Packung Animal SOFT 6 cm x 4,5 m
- 1 Packung Animal VET 8 cm x 1 m
- 1 Packung SOFT NEXT 6 cm x 1 m
- 1 Elasto Quick 3 cm x 4,5 m
- 1 Elasto Quick 7,5 cm x 4,5 m
- 2 Packungen Cold Pack small 11 cm x 15 cm
- 2 Packungen Cold Pack large 23 cm x 15 cm



Cold Packs

Die Cold Packs werden vor allem zur Reduzierung von Schwellungen nach Verletzungen wie z.B. Prellungen eingesetzt. Man drückt die Cold Packs zusammen damit die Kühlung aktiviert wird. Das Granulat im Inneren der Cold Packs verflüssigt sich und wird augenblicklich kalt. Durch weiteres Schütteln kann die Kühlung verstärkt werden. Legen Sie die Cold Packs mit einer Unterlage (ein Handtuch) auf die Verletzung. Sie kühlen bis zu 30 Minuten.

Die Cold Packs gibt es in zwei verschiedenen Größen und sind bestens für die Human- und Veterinärmedizin geeignet.

Abmessungen:

- Cold Pack small: 11 x 15 cm Art.-Nr. 173050
- Cold Pack large: 23 x 15 cm Art.-Nr. 173060



ZUSAMMENFASSUNG	HUMANMEDIZIN		VETERINÄRMEDIZIN			HUM & VET
	SOFT NEXT	UNI NEXT	Animal SOFT	Animal VET	Animal Polster	Elasto Quick
Produkteigenschaften						
Selbsthaftend	●	●	●	●		●
Selbstklebend					●	
Haftet nur an sich selbst	●	●	●	●		
Weich	●	●	●	●	●	
Kreuzelastisch	●	●	●	●	●	
Längselastisch						●
Porös	●	●	●	●	●	●
Absorbierend	●	●	●	●	●	
Stoppt Blutungen	●	●	●	●		
Hält auch im Wasser	●	●	●	●		
Geeignet als Erstverband, direkt auf die Wunde	●	●	●	●		
Geeignet als 2. Verbandsschicht	●	●	●	●	●	●
Geeignet als 3. Verbandsschicht					●	●
Fixierung						●
Stärke	1,9 mm	5 mm	1,9 mm	5 mm	5 mm	

MEDSYSTEM

Medizinische Anlagen und Systeme GmbH



MEDSYSTEM

Medizinische Anlagen und Systeme Gesellschaft mbH

BÜRO: (kein Kundenverkehr)

SHOWROOM / LAGER:

Hadersfelderstraße 41
A-3420 Kritzensdorf / Klosterneuburg

Inkustraße 1-7, Obj. 5 - Top 5
A-3400 Klosterneuburg

Tel.: 02243 / 314 68 | Fax: 02243 / 315 68 | E-Mail: office@medsystem.at

Web: www.medsystem.at

Onlineshop: shop.medsystem.at